


# Composieten

## Verschillende kleuren

Ieder merk heeft z'n eigen coderingen. Meestal wordt een onderscheid gemaakt in opaciteit.

Meestal een drietal soorten : - dentine of opake kleuren  
- glazuur, enamel kleuren  
- transparante kleuren

Standard Shades

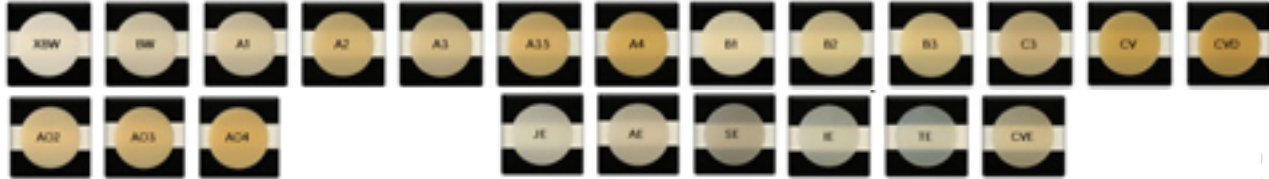


## Compules - spuitjes



Anterieur : voor vullingen vooraan, in de front

Posterieur : voor vullingen achteraan

Universeel (Hybride) : vooraan + achteraan

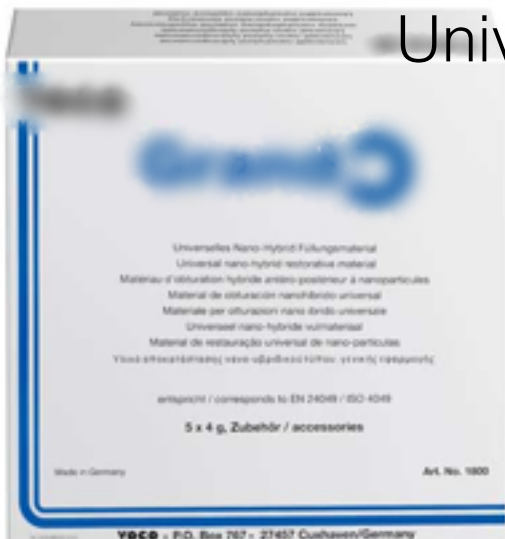


Normaal - flowable : meer vloeibare composiet



Polymerisatielamp : composiet wordt hard (polymeriseert) door de composiet te belichten met een polymerisatielamp.

De composiet wordt 10 à 20 seconden belicht (afhankelijk van de soort composiet), van een zo kort mogelijk afstand, omdat het licht maar een beperkte diepte door het composiet dringt (niet tegen de composiet)

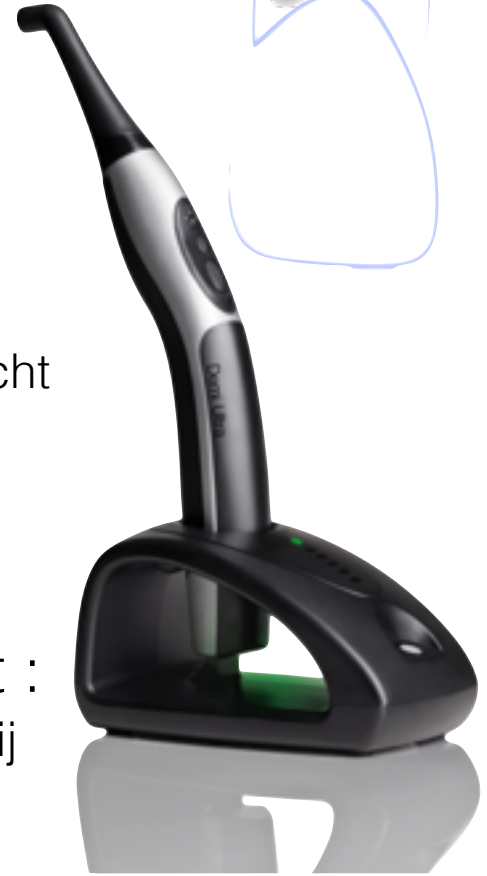


Bulkcomposiet :

composiet krimpt bij het verharden en wordt daarom in kleine hoeveelheden aangebracht. Bulkcomposiet kan in grotere hoeveelheden worden aangebracht.

**Bulk Fill**  
Flowable Restorative

Composiet  
modellerinstrumenten

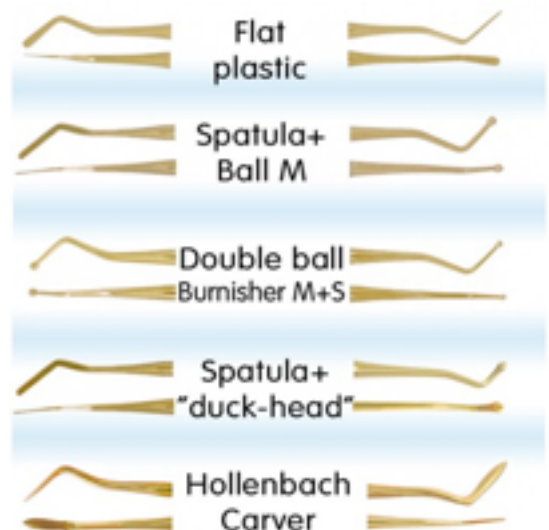


# Bonding : is het kleefmiddel tussen tand en composiet

## 3-stap bonding : etsen - primer - bondig



- tandoppervlak etsen
- afspoelen
- kort drogen
- primer aanbrengen
- uitblazen
- bonding aanbrengen
- uitblazen
- belichten

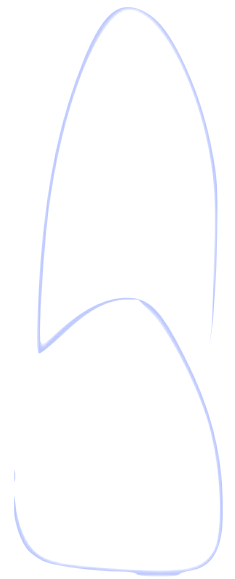

## 2-stap bonding : zelfetsende primer - bonding



- primer aanbrengen
- uitblazen
- bonding aanbrengen
- uitblazen
- belichten

## 1-stap bonding : alles-in-één (all-in-one)

- bonding aanbrengen
- uitblazen
- belichten

