


Stralingshygiëne - Stralingsbescherming



1

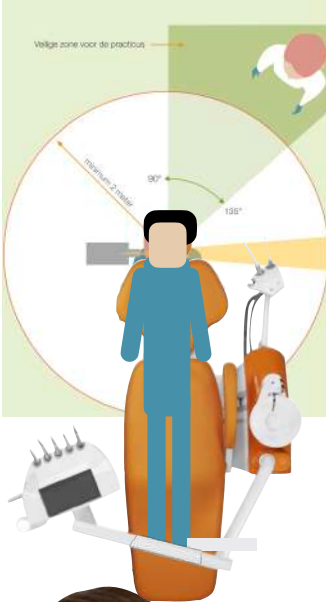

2



3



4



5

1. Afstand houden : tenminste 2 meter.
2. Kinderen uit de praktijk verwijderen bij een opname.
3. Schildklierkraag of plateau voor de patiënt.
4. Rx opnames bij zwangere vrouwen beperken.
5. Indien zelf zwanger – tandarts verwittigen – arbeidsgeneesheer – uit de praktijk gaan bij een opname

soorten röntgenopnames

*Er zijn nog andere soorten opnames.
Dit zijn de meest gebruikte.*

Intra-oraal



Bitewing-opname:
Opname bij een mondonderzoek



Periapicale—opname (horizontaal)
Opname in functie van een behandeling van molaren, premolaren (wortelkanaalbehandeling, extractie)



Periapicale—opname (verticaal)
Opname in functie van een behandeling van snijtanden, hoektanden (wortelkanaalbehandeling, extractie)



Extra-oraal



OPG



Téle (vooral bij orthodontie)




Richthulpmiddelen voor intra-orale foto's


Er bestaan richthulpmiddelen van een aantal merken. Hier worden kenmerken opgesomd hoe je ze kan herkennen.





Het bijtvlak zit in het midden van de foto

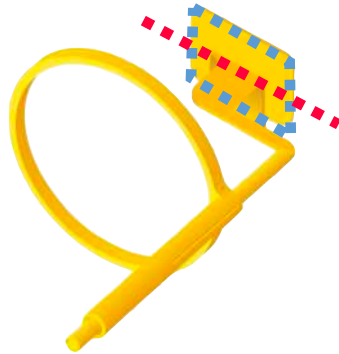

Het bijtvlak zit op de rand van de foto - foto horizontaal

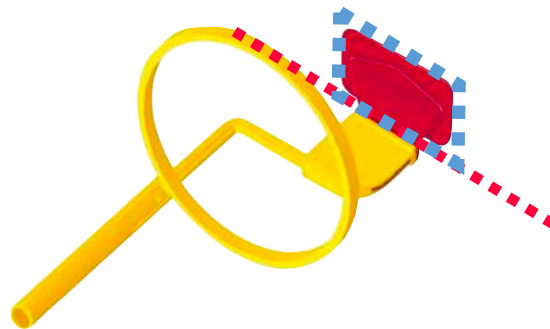

Het bijtvlak zit op de rand van de foto - foto verticaal

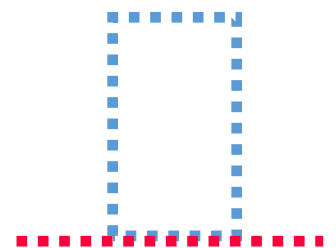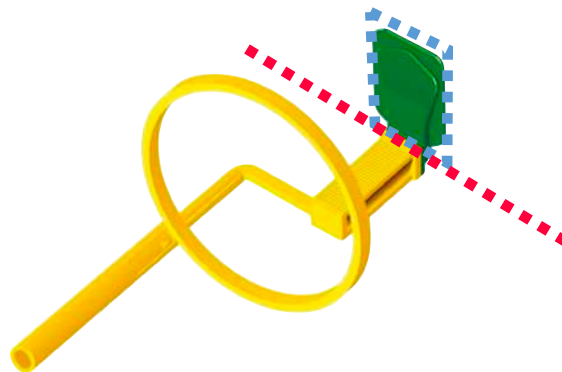

Foto



Bijtvlak



Soorten beeldragers

Om in de mond te plaatsen worden de beeldragers beschermd tegen besmetting door een hoes.

Fosforplaten

Fosforplaten zijn gebruiksvriendelijker.



Fosforplaten moeten in een scan-toestel geplaatst worden vooraleer het beeld op het scherm komt. Afhankelijk van het type toestel, moet de fosforplaat op een bepaalde wijze van een hoes voorzien worden en moet de fosforplaat op een bepaalde wijze in de scanner geplaatst worden. Hoe dit op een hygiënische manier gebeurt is afhankelijk van het type toestel.

Captor - Sensor



Het beeld komt onmiddellijk op het beeldscherm.

Je moet opletten dat de Rx-opname bij de juiste patiëntfiche terecht komt. De software moet je juist instellen. Dit is afhankelijk van het type toestel.